

**Miele**



# Elige a tu experto. Consigue un aliado.

Limpieza analítica de tu vidrio de laboratorio  
con nuestro ExpertLine.



**Para todos los sectores**  
y especialidades

**15 000**

horas de funcionamiento de prueba



**Iluminación de la cuba y puerta de cristal\***



**Calidad fiable para unos resultados perfectos**

Nuestras lavadoras desinfectadoras para laboratorio ExpertLine garantizan un proceso de limpieza y secado del vidrio de laboratorio analíticamente puro al más alto grado para conseguir resultados fiables de forma continua.

**EASYLOAD**

Versatilidad, rapidez y gran eficacia

Piezas de recambio disponibles hasta

**15 años**

después de finalizar la producción en serie de los equipos.



**Sostenible**

gracias a programas optimizados

**¡Por fin, un aliado flexible en tu equipo!**

Disfruta de todas las ventajas de ExpertLine.

**Manejo táctil**  rápido e intuitivo



**Opciones de secado adecuadas para cada aplicación**

Desde la función AutoOpen hasta el secado por aire caliente DryPlus, nuestros expertos te ofrecen diversas opciones.

Conexión en red digital gracias a



**Miele MOVE Connect**

**Excelente y eficaz rendimiento de limpieza con altas capacidades**

La presión de lavado se ajusta en función de los requisitos de lavado pertinentes: la alta presión facilita la eliminación de la suciedad persistente, mientras que la baja presión garantiza que el vidrio de laboratorio se humedezca de manera uniforme y se ahorren recursos.



Más información  
ExpertLine  
[www.miele.es/  
pro/expertline-lab](http://www.miele.es/pro/expertline-lab)

# Tu compañero de equipo eficiente.

Manejo intuitivo gracias al display táctil a color y funcionamiento eficiente, incluso para altas capacidades en un espacio compacto.

## Funcionamiento intuitivo

El intuitivo display táctil a color te permite acceder rápidamente a tus programas favoritos. Se pueden realizar ajustes individuales y el estado del programa se muestra de forma clara y fácil de entender.

## Listo para usar rápidamente

Puesta en funcionamiento del equipo optimizada para que resulte rápida y sencilla. Y en caso de que se produzcan interrupciones, ExpertLine está diseñado para garantizar que la intervención técnica pueda llevarse a cabo de forma rápida y sencilla gracias a la colocación inteligente y optimizada de los componentes principales.

## Eficaz rendimiento de limpieza

Con la bomba de calentamiento de velocidad variable, la presión de lavado se ajusta en función de las necesidades de limpieza concretas: con una alta presión, se facilita la eliminación de la suciedad más resistente; con una baja presión, se garantiza la humectación uniforme del vidrio de laboratorio sin consumir recursos. Varios sensores controlan si los brazos aspersores y la presión de lavado funcionan correctamente.

## Vista perfecta

Gracias a la puerta de cristal opcional y a la iluminación de la cuba, el proceso de limpieza es aún más fácil de supervisar, y el vidrio de laboratorio puede cargarse de forma rápida y cómoda.





**Miele**

## Un aliado versátil en tu equipo.

Para satisfacer todos los requisitos de la limpieza de vidrio de laboratorio, el flexible sistema de accesorios EasyLoad hace que la limpieza sea considerablemente más rápida, sencilla y eficaz.

En cuanto al secado, nuestro experto ofrece opciones como la función AutoOpen y el secado por aire caliente DryPlus.



## Un aliado en tu equipo duradero y sostenible.

Para nosotros, la durabilidad es más que una palabra. Por este motivo, ExpertLine también se somete a pruebas durante 15 000 horas de funcionamiento, y la disponibilidad de piezas de recambio durante hasta 15 años garantiza que las reparaciones puedan llevarse a cabo incluso después del fin de la producción en serie del equipo.

Programas eficientes específicamente diseñados para cada aplicación, programas cortos y tecnologías que ahorran recursos: todo esto te permite ahorrar agua, electricidad y detergentes así como proteger el medioambiente.

## Un aliado en tu equipo internacional y digital.

La opción de selección sencilla del idioma convierte a los modelos ExpertLine en los expertos internacionales de tu equipo. Las secuencias de instrucciones que se muestran en el display garantizan la fluidez de los procesos.

Gracias a la conexión con Miele MOVE Connect, los datos del equipo pueden consultarse desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que permite optimizar los procesos de trabajo. Los clientes también tienen acceso a las actualizaciones del equipo y reciben análisis del proceso de limpieza. Para el soporte técnico directo, existe una interfaz con el Servicio Posventa que transmite información importante para ahorrar tiempo y esfuerzo.



# Elige a tu experto.

Todos los modelos de esta gama ofrecen la máxima eficacia gracias a su gran capacidad y rendimiento de limpieza que ahorra recursos con los siguientes aspectos destacados:



Display táctil a color de gran tamaño e intuitivo



Dosificación de detergente líquido con reconocimiento de nivel de llenado opcional



Paquete de programas completo



Conectividad total: wifi de serie, LAN opcional



Iluminación de la cuba para una mayor comodidad durante la carga de los utensilios



Basta con escanear el código QR y descubrir ExpertLine. [www.miele.es/pro/expertline-lab](http://www.miele.es/pro/expertline-lab)



## ExpertLine PLW 8683 con tecnología EcoDry y opción de puerta de cristal

Nuestra tecnología EcoDry cuenta con la función AutoOpen, que permite la salida de la humedad residual al final del programa, lo que facilita el enfriamiento del vidrio y, por lo tanto, una descarga más inmediata. La variante con puerta de cristal también permite supervisar fácilmente el proceso de limpieza.

## ExpertLine PLW 8693 con secado por aire caliente DryPlus para los mejores resultados de secado

Nuestro secado por aire caliente DryPlus garantiza los mejores resultados, incluso en el caso de vidrio estrecho. La función AutoOpen también garantiza una mejor eliminación de la humedad residual y, por tanto, un enfriamiento más rápido del vidrio de laboratorio.




## ExpertLine PLW 8683 CD con espacio de almacenamiento adicional para productos para la limpieza y opción de puerta de cristal

Además del secado por aire caliente DryPlus con función AutoOpen, este equipo también ofrece un práctico espacio de almacenamiento para los productos para la limpieza en el armario colindante; en este caso, la variante de puerta de cristal permite supervisar fácilmente el proceso de secado.

## Miele 360PRO.

Una solución a medida para cada laboratorio.

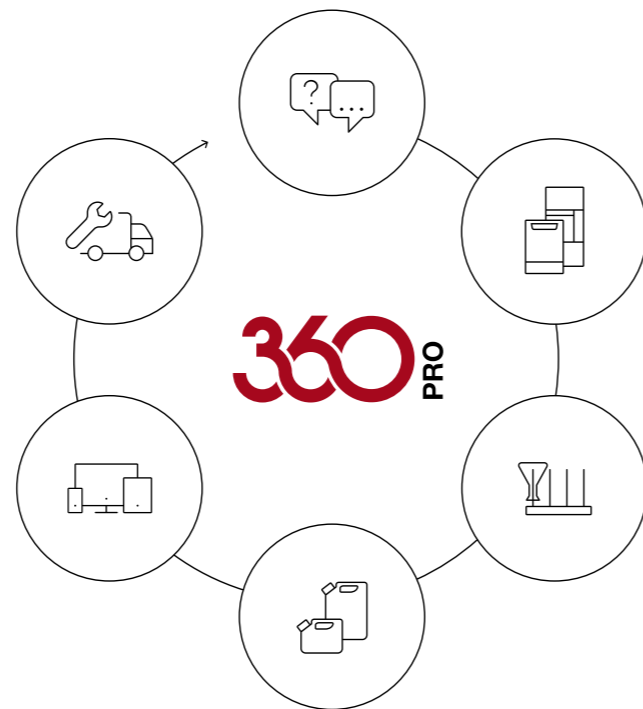

### La precisión es una responsabilidad. Algo que nos inspira.

Entendemos que la precisión es una responsabilidad en laboratorios de cualquier tipo. Para ayudarte de la mejor manera posible, te ofrecemos 360PRO. Nuestro sistema integral con soluciones perfectamente adaptadas de un solo proveedor. Desde la planificación hasta la sostenibilidad, pasando por los accesorios, la conectividad, los detergentes y el mantenimiento, con las lavadoras desinfectadoras para laboratorio adecuadas: estamos a tu servicio para que puedas centrarte en ofrecer resultados excelentes.



Más información sobre Miele 360PRO  
[www.miele.es/pro/lab](http://www.miele.es/pro/lab)

## Para una **protección** integral.

Nuestro servicio PROtect combina amplias soluciones integrales, el máximo control presupuestario y un suministro fluido de piezas de recambio. Te proporcionamos un asesoramiento transparente y específico para tu sector, coordinamos las citas y garantizamos la disponibilidad de las piezas de recambio adecuadas, incluso 15 años después del fin de la producción en serie.



Más información en PROtect  
[www.miele.es/pro/protect](http://www.miele.es/pro/protect)

## Aspiración a la sostenibilidad, diseño premiado.

### Genial para tu equipo. Aún mejor para el planeta.

«Immer Besser» (siempre mejor) es nuestra filosofía desde 1899. Este lema nos motiva a ser mejores que ayer. Es el motor que nos impulsa a ser mejores cada día y a desarrollar aparatos más inteligentes. Nuestra gama ExpertLine marca nuevos hitos en cuanto a sostenibilidad. Por ejemplo, los costes operativos se reducen y la huella ecológica se minimiza gracias a la disponibilidad de piezas de repuesto durante 15 años, mientras que los test durante 15 000 horas de funcionamiento garantizan una durabilidad extremadamente larga. Recientemente equipados con instrucciones de manejo digitales para no generar residuos.

### La gama ExpertLine de Miele es la orgullosa ganadora del iF Design Award 2024.

«Estamos encantados de recibir estos premios una vez más, ya que demuestran visiblemente al resto del mundo la calidad sobresaliente de nuestra estética y diseño».

Andreas Enslin, vicepresidente del Centro de Diseño de Miele



**Miele**



# No hay nada como el **contacto personal.**

Contacta con nosotros para obtener más información sobre el nuevo miembro de tu equipo, simplemente llámanos o utiliza el formulario de contacto de nuestra página web.

**Tel.: +34 911 11 55 60**

Lun.–vier. De 8:30 a 16:00 h



Más información sobre Miele ExpertLine  
y el formulario de contacto en  
[www.miele.es/pro/expertline-lab](http://www.miele.es/pro/expertline-lab)